佐藤歯材総合カタログ Vol. 20

スパークリングスマイルをあなたに



DENTAL PRODUCTS CATALOG

会社概要

佐藤歯材 株式会社 社名

代表取締役 佐藤 文昭 代表者

所在地 **T110-0015**

東京都台東区東上野 1 - 15 - 3

TEL 03 - 3833 - 3986 FAX03 - 3833 - 3989

事業内容 歯科器械 材料 薬品 化粧品 美容製品 卸売・輸出入

■ 会社紹介

佐藤歯材は大正13年(1924年)6月、初代社長佐藤次男が東京都駒込道坂に佐藤歯科商会として開業しました。

その後現在地に移り、昭和43年に佐藤歯材株式会社に社名変更、歯科器械材料薬品一次問屋として、

日本の歯科材料流通に微力ながら邁進してまいりました。





2010年に ISO9001 を取得 2010年にISO14001を取得

■ 当社の目指すところ

創業1924年より100年近く歯科医療器材、薬品、材料専門商社として歩んで参りました。

長い経験と知識をもとに国内外の先進的な企業と協業し患者様のQOLの増進のみならず

人類の健康に寄与していくことを目標としております。

代表取締役 佐藤 文昭

Company Name: Satou Dental Material Co., Ltd.

Address: 1-15-3 Higashi-Ueno Taito-ku Tokyo 110-0015 Japan

Phone: 81-(0)3-3833-3986 Fax: 81-(0)3-3833-3989

E-mail: info@satoushizai.co.jp Website: http://www.satoushizai.co.jp

We have been in busineess successfully since 1924 as Dental Whole Saler in

Japan that is one of most tough market in the world.

Now we are expanding our business field not only to European Countries but also to all of the world.

So we always welcome any inquiries from any countries.

■ 表示マークについて

カタログ カタログのご用意があります

サンプル サンプルのご用意があります

試 着 試着のご用意があります

CONTENTS _{目次}

	200	-		
=v.	371	,43	174	ш

オロリン マルチセプトプラス

オロリン バーバス	1
イソラピッド	2
デンディロワイプス/デンディロジャンボワイプス	2
デンティロ ゼロ	3
オロクリーン プラス	3
アセプトプリント スプレー	4
アセプトプリント リキッド	4
効果一覧表	5
SUN402 インスツルメントエンザイム	6
SUN420J インスツルメントDIFパウダー	6
SUN280K ラピッドサーフェスプラス	7
SUN180K ラピッドサーフェスプラス	7
SUN260 ウェットワイプス アルコールベース 容器付/SUN261 詰替用	8
SUN270 ウェットワイプス アルコールフリー 容器付/SUN271 詰替用	8
SUN500 サクション クリーナー	9
SUN520 インプレッション DIF	9
SUN920 スプレーボトル	.10
効果一覧表	.10
デンタルラピッドSDUキッド	.11
効果一覧表	.11
SONOREX DIGITEC DT102H/DT100H/DT255H	12
DIFクロス	.13
ザヴィーナワイピングクロス	.13
スーパークレープ HF220 / HF260	.14
サナス KS-50EX	.14
CAE器具用 色が変わればお取り替え	.15
こもの錆びてま専科	.15
パイプつまりま専科スーパー	.15
除菌洗濯しま専科	16
特大除菌クロス	16
パワーリキッド	.17
メタルケア	.17
メタコート AR-H	.17
クリアブラシCB-100S	.17
オロキーパー SAタイプ	.18
プチクールジェル80	.18
京添田・併反射フェイスシールド	18

衛生・予防・口腔ケア・介護

クローバー 歯垢染め出し液...

染め出し液落し隊	20
クローバー「無痛」バキュームチップ Ver.2	20
SUN438P ペリオタガトース	21
SUN435Q レモン/SUN436Q ミント/SUN437Q チェリー	21
Profits プロフィッツ	22
ナノフロス マイクロライザー	23
スパークリングスマイル アダルト3列ブラシ	23
スパークリングスマイル キッズ	23
ジャーマンアプリケーター&ブラシ	24
長息生活	24
クローバー ポリッシングブラシ(PMTC用)	25
スパークリングスマイル コントラ エクストラソフト 雪色(PMTC用)	25
クローバー 口腔清掃用綿棒	25
クローバー スパークリングミラー	26
クローバー 撥水フェイスドレープ	26
キュオム ウェットプラス	26
スマイルハニー はちみつジェル	27
スマイルハニー オーラルクリーンジェル	27
スマイルハニー オーラルクリーンジェルスプレー	27
スマイルハニー ナチュラルデントクリーナー	27
白 龙	

日 1

ds+ミフノ	メティカル	ノアッション	[,] 28

技工用品

モバイルシェルター	. 32
クローバー フィンガー君	. 32
しっかりつかみ隊	. 32

研削・研磨材

Luvis E-100...

治療

クロステック サイクロンジルコニウム クラウンリムーバー 3	35
ミュラーオミクロン EASY CORD3	35
角薬瓶 サクラ色	35

その他

防災%防犯	 36

器具用 除菌/洗浄剤

オロリン マルチセプトプラス (アルデヒド非含有)

カタログ

OCC Switzerland

1ステップで除菌と洗浄が可能



用道

● 一般器具、外科用器具、インプラント器具の洗浄・除菌・防錆

特長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 最長 7 日間まで連続使用が可能です。

使用方法(希釈使用)


● 汚染物の飛沫を防ぐため器具を水洗いせずに50倍(2%)希釈液に15分間浸漬してください。

浸漬後は薬液が落ちるまで十分に水洗いしてから滅菌処理してください。 超音波洗浄器または蓋付容器をご使用ください。

主成分

● アルキルアミン、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム、防錆剤

pH:11.5~13 医薬用外劇物

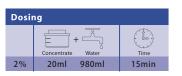

規 格	医院価格
2L	¥12.600

回転小器具用 防錆/除菌/洗浄剤

オロリン バーバス (アルデヒド非含有)

サンプル

カタロク

短時間除菌と優れた防錆力





5L

Singue Artem

用途

● バー、リーマー、ファイルなど 回転小器具の洗浄・除菌・防錆。

特 長

- 微細な構造の回転小器具に 1 分間で作用します。
- 防錆成分が多く配合されています。
- 最長 7 日間まで連続使用が可能です。

使用方法(原液使用)

汚染物の飛沫を防ぐために回転小器具を水洗いせずに超音波洗浄器または専用蓋付容器 に原液で 1 分間浸漬してください。

防錆効果を持続するために浸漬後は水洗いせずに乾燥させてから滅菌処理してください。

主成分

● イソプロパノール、フェノキシエタノール、第 4 級アンモニウム化合物 腐食防止剤

pH:13~14

規 格	医院価格
1L	¥4,200
5L	¥15,800
車用容器	¥2 940

表面用 除菌スプレー

幅広い抗菌スペクトル

イソラピッド

用途

● ユニット、医療機器、手用器具、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- 2 L 補充用があり経済的です。

使用方法 (原液使用)

- 液体を清潔なクロスまたはDIFクロス(P13)に侵み込ませて清拭してください。
- 1分間放置し、その後自然乾燥させるかデンティロワイプスもしくは清潔なクロスで拭き取ってください。
- アルコールに耐性のない デリケートな素材の 表面やPC液晶ディスプレイには使用しないでください。

主成分

● イソプロパノール、エタノール、第4級アンモニウム化合物

規格	医院価格
スプレ ー タイプ 1L	¥5,900
補充用 2L	¥9,800

表面用 除菌クロス

スプレータイプ 1L

デンティロワイプス/デンティロジャンボワイプス

補充用 2L

カタログ

作業が簡単なクロスタイプ





レギュラーサイズ 14.5×20cm

ジャンボサイズ 14.5×40cm



デンティロワイプス

リワイプス ジャンボワイプス

用途

● ユニット、医療機器、手用器具、設備など表面の除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- デンティロワイプスは無香料、フローラル、レモンの香りがあります。
- ジャンボワイプス(無香料のみ)はより広範囲な除菌清拭に使用可能です。
- 往診や介護にも使用できます。

使用方法

- 専用容器(別売)にセットし、1 枚ずつ取り出して対象とする部分、器具表面を十分に清拭して1分間放置してください。
- 使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

主成分

●イソプロパノール、エタノール、第4級アンモニウム化合物、精製水、香料

規格	医院価格
デンティロワイプス 120枚入 各種	¥2,980
容器(別売)	¥210
デンティロジャンボワイプス 100枚入	¥4,800
容器(別売)	¥320

表面用 除菌スプレー

デンティロ ゼロ (アルコール非含有)

アルコールに敏感な材質に配慮



● 液晶ディスプレイ、本革、プラスチック、アクリルガラスなどデリケートな素材の表面 除菌。

特 長

- アルコールに敏感な材質に適しています。
- 刺激臭を抑えた成分構成です。
- 除菌と同時に汚れも落とします。

使用方法(原液使用)

- 清潔なクロス等に浸み込ませて、対象物の表面を清拭してください。
- 1分間放置し、その後清潔なクロス等で液を拭き取ってください。 ※液晶画面やレンズ、精密機器は対象物を傷つける場合がありますので自己発塵し ないクロス (ザヴィーナワイピングクロス [P13]) 等を推奨します。

主成分

● アミノ-アルキル-グリシン、ベンゼル-アルキルディメチル-アンモニウムクロライド、

規 格	医院価格
1L	¥5,900

バキューム回路・スピットン用 除菌/洗浄剤

オロクリーン プラス (アルデヒド非含有)

サンプル カタログ

バキューム回路、スピットンの除菌洗浄

● 治療用ユニットや診療所内の排水設備、バキューム回路の除菌・洗浄。


- 特 長 ● 無発泡性で泡の逆流や不快な臭いを抑制します。
- 吸引システム・スピットンの除菌・洗浄・脱臭メンテナンスが同時に行えます。

使用方法 (希釈使用)

- 50倍に希釈して2%溶液を作製します。
- 診療時間終了後や外科処置後など必要に応じて各ユニットごとに溶液1Lを吸引管 よりバキュームさせます。
- 同様に溶液 500mlをスピットン鉢に流します。
- ●60分間放置後にはバキューム回路とスピットン鉢を十分に水洗いしてください。

主成分

● ベンゼル-アルキルディメチル-アンモニウムクロライド、発泡防止剤、界面活性剤 pH:10~12

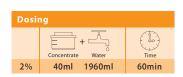

規 格	医院価格
2L	¥9.500

印象用 除菌スプレー

アセプトプリント スプレー (アルデヒド非含有)

カタログ

OCC Switzerland

印象表面を 1 分間で除菌洗浄



● 印象面、印象トレー、矯正装置、ワックスバイト、シリコンバイトなどの除菌・洗浄。

特長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- アルジネート、シリコン、寒天印象材に使用できます。
- 寸法精度や面荒れの影響に配慮した成分です。

使用方法(原液使用)

- 血液・唾液が多量に付着している際は飛散しないよう水洗いしてください。
- 印象表面およびトレー全体にスプレーしてください。
- 1分後、表面を丁寧に水洗いし石膏を注入してください。(印象材によっては石膏の 最適時期が異なりますので、印象材メーカーの指示に従ってください。)

主成分

● エタノール、1-プロパノール、第4級アンモニウム化合物

規格	医院価格
スプレータイプ 1L	¥5,900
詰替用 1L	¥5,700

印象用 除菌/洗浄剤

アセプトプリント リキッド (アルデヒド非含有)

印象体の除菌と洗浄が同時に完了



● 印象面、印象トレー、矯正装置、ワックスバイト、シリコンバイトなどの除菌・洗浄。

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 各種印象体に使用できます。
- 希釈使用のため経済的です。

使用方法(希釈使用)

- 水 970ml に対して原液 30ml を希釈させ溶液を作製します。
- 印象を採取後、印象体を水洗いせずに1分間浸漬させてください。
- 1分経過したら表面を丁寧に水洗いし、石膏を流してください。シリコン印象材、ア ルジネート印象材にも使用できます。

● ベンゼル - アルキルディメチル - アンモニウムクロライド、界面活性剤、洗浄促進剤

pH:10.5~12.5



規格	医院価格
11	¥15.800

効果一覧表

カタログ

ブルーは器具用、グリーンはユニットやハンドピースなどの表面、イエローは印象表面やバキュームシステムが対象になり誤使用 しないように企画デザインされています。

器具

品 名	用途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザ A型ウイルス	ポリオ ウイルス
オロリンマルチセプトプラス	器具	希釈	5分 2%	15分 2%								
オロリンバーバス	小器具	原液	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	1分	1分	30秒	15秒	1分

表面

品 名	用途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザ A型ウイルス	ポリオ ウイルス
イソラピッドスプレー	ユニット	原液	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
デンティロワイプス	ユニット	原液	30秒	15秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
デンティロゼロ	ユニット	原液	30秒	30秒	30秒	1分	1分	60分	60分	1分	30秒	60分

バキュームシステム/印象表面

品 名	用途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザ A型ウイルス	ポリオ ウイルス
オロクリーンプラス	バキューム回路 スピットン	希釈	5分 2%	5分 2%	5分 2%	5分 2%	5分 2%		30分 _{2%}	5分 2%	5分 2%	60分 2%
アセプトプリントスプレー	印象体	原液	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
アセプトプリントリキッド	印象体	希釈	1分 3%	1分 1%	1分 3%	1分 3%				1分 3%	1分 3%	

- ・上記データは欧州規格に準じた試験結果です。
- ・製品成分はすべてアルデヒド、フェノール、塩素を含まない人体・環境に配慮した生分解性です。

器具用 除菌/洗浄剤

SUN402 インスツルメントエンザイム (アルデヒド非含有)



● 一般器具、インプラント器具、外科用器具、印象用トレー、吸引管などの洗浄・除菌・防錆。

特 長

● 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。

使用方法 (希釈使用)

●汚染物の飛沫を防ぐために器具を水洗いせずに超音波洗浄器または蓋付容器に50 倍希釈で30分間浸漬してください。 浸漬後は十分に水洗いしてから滅菌してください。

主成分

● ビス(3-アミノプロピル)-ドデシルアミン 3.3g ジデシルメチル - ポリオキシエチルプロピオン酸アンモニウム 2.8g 防錆剤 / 精製水 / 香料 / 酵素剤(プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ)

pH:10 医薬用外劇物

規格	医院価格
2.5L	¥19,000

非耐熱器具用 除菌/洗浄剤

SUN420J インスツルメントDIFパウダー (過酢酸系製剤)

用途

● シリコンゴム、プラスチック、内視鏡など非耐熱性器具の洗浄・除菌・防錆。

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 耐熱性がない器具の除菌に適しています。
- 芽胞をはじめ広範囲の微生物に作用します。

- 50倍希釈は蓋付容器に付属の計量スプーン3杯(粉末20g)と40℃の温水980ml を入れてよくかき混ぜてください。15分間浸漬後に流水下で十分に水洗いしてくだ
- 100倍希釈は蓋付容器に付属の計量スプーン1.5杯(10g)と40℃の温水990mlを 入れてよくかき混ぜてください。60分間浸漬後に流水下で十分に水洗いしてくださ い。

主成分

● 炭酸ナトリウム過酸化水素化物、テトラアセチルエチレンジアミン、クエン酸、 界面活性剤、防錆剤

pH:8

規格	医院価格
1.5kg	¥15,000



SUN280K ラピッドサーフェスプラス



● ユニット、医療機器、手用器具類、備品、設備など表面の除菌。

特 長

● 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。

使用方法(原液使用)

● 原液を専用スプレー容器 (SUN920) に移し替えてクロスに噴霧してから対象物の 表面を拭いてください。DIF クロス[P13]に浸み込ませて使用もできます。 1 分間放置後してから自然乾燥または拭き取ってください。

主成分

● 1- プロパノール 37g、エタノール 24g

pH:5~8

規格	医院価格
2.5L	¥16,000

表面用 除菌スプレー

SUN180K ラピッドサーフェスプラス (携帯用)



用途

● ユニット、医療機器、手用器具類、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 往診に便利な携帯用スプレーです。
- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。

使用方法 (原液使用)

- 原液をクロスに噴霧してから対象物の表面を拭いてください。
- 1 分間放置後してから自然乾燥または拭き取ってください。

主成分

● 1- プロパノール 37g、エタノール 24g

pH:5~8

規格	医院価格
200ml	¥1,500

表面用 除菌クロス

SUN260 ウェットワイプス アルコールベース 容器付/SUN261 詰替用

カタログ



13×20cm

● ユニット、医療機器、手用器具類、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 厚手のクロスで拭きやすいです。
- 詰替用があり経済的です。
- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。

使用方法

● 容器から1枚ずつ取り出して対象物の表面を拭いて1分間放置してください。

主成分

● エタノール 35.0g、第4級アンモニウム化合物 0.066g、香料

規格	医院価格
容器付 100枚入	¥2,800
詰替用 100枚入	¥2,500

表面用 除菌クロス

SUN270 ウェットワイプス アルコールフリー 容器付/SUN271 詰替用



13×20cm

● 液晶画面、プラスチック類、アクリル製ガラス、本革などデリケートな素材の表面

特 長

- アルコールフリーのため液晶画面やアクリルガラスなど敏感な素材に使用できます。
- 厚手のクロスで拭き取りやすいです。
- 詰替用があり経済的です。

使用方法

● 容器から1枚ずつ取り出して対象物の表面を拭いて1分間放置してください。

主成分

● ジアルキル - ジメチル塩化アンモニウム 0.24g アルキル - ジメチル塩化アンモニウム 0.48g

規格	医院価格
容器付 100枚入	¥2,800
詰替用 100枚入	¥2,500

SUN500 サクション クリーナー (アルデヒド非含有)

カタログ

● 治療用ユニットや院内の排水設備、バキューム回路の洗浄・除菌。

特 長

- 無発泡性で泡の逆流や不快な臭いを抑制します。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で使用者や環境にやさしい成分です。
- 吸引システム・スピットンの除菌・洗浄・脱臭メンテナンスが同時に行えます。

使用方法(希釈使用)

● 希釈した溶液を外科処置後や診療時間後に希釈液1Lをスピットン鉢に流します。同様 に希釈液1Lを吸引管より吸引します。3%(33倍希釈)は2分、2%(50倍希釈)は5 分、1%(100倍希釈)は60分で作用します。

● ジメチル - ジオクチル塩化アンモニウム 7.5g ベンジル - ジメチルドデシル塩化アンモニウム 0.6g

pH:8∼9

規格	医院価格
2.5L	¥18,000

印象用 除菌/洗浄剤

SUN520 インプレッション DIF (アルデヒド非含有)

カタログ



用途

● 印象表面(アルギン・シリコン・寒天)、印象用トレー、ワックスバイトなどの洗浄・除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 2 分間で作用します。
- スプレーまたは浸漬と除菌方法を選べます。
- 2 分間で作用するため寸法変化や面荒れのリスクを抑えられます。

使用方法(原液使用)

スプレー:①原液を専用スプレー容器に移し替えて印象表面とトレーに噴霧してください。 ②2分間放置してから水洗いし石膏を流してください。

浸漬法:①印象物を水洗いせずに原液に2分間浸漬してください。

②水洗いして石膏を流してください。 ※液交換目安1日

主成分

● N-アルキル (C12-C18) -N- ベンジル -N、N- ジメチル塩化アンモニウム 0.16g N、N-ジデシル -N、N-ジメチル塩化アンモニウム - クロリド 0.16g N- アルキル (C12-C14) -N- エチルベンジル -N、N- ジメチル塩化アンモニウム 0.16g

pH:7

規格	医院価格
2.5L	¥14,000

アクセサリー

SUN920 スプレーボトル





用途

● SUN280K · SUN520 用スプレー容器

特 長

- ボトル本体が円錐形になっているため安定性があり握りやすいです。
- ノズル先端に金属が入っており均等にかつ広範囲に噴霧することができます。
- おしゃれなデザインです。

使用方法

● サンセプトSUN280Kラピッドサーフェスプラス2.5LまたはSUN520インプレッショ ンDIF2.5Lを本容器に入れ替えてご使用ください。

材質

PE

規格	医院価格
500mL容器	¥1,200

器具

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN402 インスツルメントエンザイム	5分 2%	5分 2%	5分 2%	5分 2%	30分 2%		5分 2%			
SUN420J インスツルメントDIFパウダー	10分 2%	10分 2%	10分 2%	10分 2%	5分 2%	10分 2%	5分 1%	15分 2%	10分 2%	10分 2%

表面

品名	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	結核菌	アデノ ウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN280K ラピッドサーフェスプラス	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	1分	1分	1分	
SUN180K ラピッドサーフェスプラス	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	1分	1分	1分	
SUN261 ウェットワイプス アルコール	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	30秒			
SUN271 ウェットワイプス アルコールフリー	1分	1分	1分	1分			1分	30秒		

バキュームシステム/印象表面

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN500 サクションクリーナー	2分 3%	2分 3%	2分 3%	2分 3%			2分 3%			
SUN520 インプレッションDIF	2分	2分	2分	2分			2分			

[・]上記データは欧州規格に準じた試験結果です。

[・]製品成分はすべてアルデヒド、フェノール、塩素を含まない人体、環境に配慮した生分解性です。

表面用 除菌スプレー

デンタルラピッドSDリキッド





müller-omicron

香りが選べる急速表面除菌スプレー





500ml

詰替用

用途

● ユニット、医療機器、手用機器、設備など表面の除菌

特 長

- 無香料、フルーツ、フラワーの爽やかな3種の香りがあります。
- 携帯用 100ml、スプレー 500ml、補充用 1L と都合に合わせて容量が選べます。
- アルコール含有量が低いため材質また従事者にやさしいです。

使用方法(原液使用)

- 清潔なクロスまたは DIF クロス [P13] 等に浸み込ませて対象物の表面を清拭して ください。
- 1 分間放置後に自然乾燥または拭き取りをしてください。

主成分

● エタノール 43.0g、1-プロパノール 8.0g、ディデシルディメチルアンモニウムクロラ イド 0.055g(溶液 100g中)

規格	医院価格
携帯用スプレー 100ml	¥950
スプレータイプ 500ml	¥4,400
詰替用 500ml	¥4,200
補充用 1L	¥7,600

効果一覧表

表面

品名	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	ロタ ウイルス
デンタルラピッドSDリキッド	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分

超音波洗浄器



- ダブル振動子内蔵による強力スピード洗浄力
- 短時間洗浄による器具へのダメージ軽減
- ヒーター温度調節機能(20℃~80℃)
- タイマースイッチ機能(1~30分間) ● DEGAS(ガス抜き)機能
- SWEEP機能によるムラのない均一洗浄
- バスケット、ビーカなどの豊富な洗浄オプション
- ステンレス加工の表面による細菌の蓄積を防止

※付属品は別売り

SONOREX超音波浄器は、ダブル振動子により機械的な超音波を伝導させ、 化学的な溶液により洗浄を活性化させます。これにより汚れを落としやす くし、その後の超音波のキャビテーションにより汚れを取り除きます。 その結果、全体的な洗浄作業・時間の削減へとつながり、洗浄作業の効率 化を図ります。また、より大きな器具であれば洗浄時間は更に短縮し、こ れを繰り返すことによって超音波による器具へのダメージを軽減すること ができます。

ドイツの超音波洗浄器が可能にした強力なスピード洗浄

3秒 5秒 8秒 10秒

DEGAS (ガス抜き)機能

DEGAS機能は液体に含まれる不必要な気泡を少なくするために行っている処理のことであり、超音波洗浄では水などの液体を媒体として 超音波振動を伝達し、液中でキャビテーションを発生させて汚れを落としています。

液中には空気などの余分な気体が存在し、このような気体がキャビテーション効果を減衰させてしまい、その結果洗浄がうまく行われない ことがあります。それを防ぐためにDEGAS機能によって溶存酸素濃度を低くし、超音波の伝達力を上げることによって超音波の洗浄効果 を上げるのがDEGAS機能です。

SWEEP機能

超音波はタンクの中を波で分布するため一定の周波数の場合、槽内ではキャビテーションが強弱に分かれてしまうことにより、キャビテーシ ョンが強い場所では強い洗浄効果が得られますが、弱い場所では良い洗浄効果が得られません。

SONOREX DIGITEC DTシリーズのSWEEP機能は周波数を変えることによりキャビテーション効果を槽内で均一に発生させることで、 ムラの無い洗浄効果を得ることができます。

SONOREX DIGITEC DTシリーズ ラインナップ



■ DT102H / 容量3L / 排水バルブ有 外寸: W260×D160×H250mm 医院価格: ¥260,000 ※DT102Hのみ硬質クロムメッキ加工



■ DT100H / 容量3.0L / 排水バルブ無 外寸: W260×D160×H250mm 医院価格:¥186,000



■ DT255H / 容量5.5 L / 排水バルブ有 外寸: W325×D175×H295mm 医院価格:¥299,000

表面清拭用 ドライワイプス

DIFクロス(医療機器表面清拭用)

イソラピッドまたSUN280Kラピッドサーフェスプラスと併用推奨





16×30cm

特 長

- さまざまな液体を浸み込ませて使用できます。
- 大判サイズの厚手クロスで隅々まで広範囲に清拭可能です。

使用方法

- ロール状のクロスに液体 1L を入れて浸み込ませます。
- クロスを容器から引き出してご使用下さい。
- クロスには切れ目があるため 1 枚ずつ取り出せます。

寸法/ 160×300mm 材質/綿、ポリエステル

規格	医院価格
容器付 250枚入	¥5,000
詰替用 250枚入	¥3,500

高性能クロス

ザヴィーナワイピングクロス (精密な医療機器表面清拭用)

液晶画面やマイクロスコープなどに最適



特 長

- 軽くひと拭きで優れた拭浄性能を発揮
- 超高温特殊カット技術で自己発塵性なし
- 絹クロスの2倍 (ラロール法) の給水量とスピード
- 耐薬品性に優れ、有機溶剤の使用も可能 ● オートクレーブ可能(※乾燥工程不可)
 - 規格 医院価格

1枚入

¥380

高圧蒸気滅菌器

スーパークレーブ HF220/HF260







※コンセントはアース付3P15Aをご使用ください。

- フルオート送風乾燥タイプ
- 用途に合わせたワンタッチ切り替え操作
- 前回の設定を保持

HF220 HF260

滅菌温度:121℃/132℃ 滅菌温度:121℃/132℃

外形寸法:W490×D492×H397(mm) 外形寸法: W430×D453×H367(mm) 缶体寸法:φ220×330(mm) 缶体寸法:φ260×350(mm) 消費電力: 1,440W(AC100V) 消費電力: 1,440W(AC100V) 収 容力: 丸カスト18cm×2 収容力: 丸カスト21cm×2

重 量:27kg 重 量:35kg

製造販売元 オカモト株式会社

一般医療機器 特定保守管理医療機器

HF220: 医療機器届出番号 21900BZX00242000 HF260: 医療機器届出番号 21900BZX00243000

規格	医院価格
HF220	¥475,000
HF260	¥510,000

還元水·強酸性水連続生成器

サナス KS-50EX



- 見やすい大型液晶ディスプレイ
- 音声ガイダンス
- 5枚の大型電解槽搭載
- 余裕の処理能力

		777						
	品名·型番	サナスKS-50EX・TYH-303						
	給水仕様·接続	シャワー付分岐栓による原水・シャワー・浄水の3段階切替え						
	電源	AC100V (50Hz/60Hz)						
	定格電流	2.5A						
	消費電力	約200W(還元水pH濃度強生成時)						
本	寸法	高さ345×幅244×奥行190(mm)						
体	重量	4.7kg						
	電解方式	連続式電解方式(流量センサー内臓)						
	mmve	還元水:3.5L~4.5L/分(水道圧0.2MPa)						
	処理水量	強酸性水:0.3L~1.3L/分(水道圧0.07MPa)						
		還元水/3段階(約pH8.5~9.5)						
雷		7 净水 (中性pH7.0)						
"	生成水切り替え	段 酸性水 (約pH5.5~6.5)						
		階 強酸性水 (約pH2.3~2.7)						
解		強還元水 (約pH10.0~)						
	連続使用可能時間	常温時 還元水約60分間/強酸性水約30分間						
	電解槽洗浄方式	自動洗浄方式(洗浄時期をマイコンで制御)						
	電解槽電極材質	チタン自金メッキ						
	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭						
浄	遊離残							
浄水フ	る 留塩素 能 初期塩	総ろ過水量12,000L以上(除去率80%JISS3201試験)						
17	能初期塩							
ルル	万 ^{初州塩} 素除去	95%以上						
19	11119:	原水中に溶けている金属イオン・塩分						
'	除去できない成分	約1年間、又は12.000L通水で交換表示(水質により異なります)						
	寿命							
	使用可能水圧	0.05MPa~0.45MPa(約0.5kgf/c㎡~4.5kgf/c㎡)						
	連続使用最高水温	35°C						
	電解促進剤(強酸性水生成時)	強制溶剤型添加方式(1回分として食塩20gを添加)						
	電解促進剤補充サイン	音声ガイダンス・アラーム音・液晶ディスプレイによるお知らせ						
	保護装置	電流ヒューズ6A						
	検知装置	温度上昇検知·熱水検知						
Andrew TETTS OF								

管理医療機器 製造販売許可番号 220AGBZX00231A02


規格	医院価格
本体	¥298,000







50倍希釈 30分

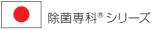

器具用 除菌/洗浄/防錆剤

CAE器具用 色が変わればお取り替え

青色から黄色に変色します

CAEとはNa-ココイル-L-アルギニンエチルエステル・DLピロリドンカルボン酸、 更にアミノ酸系の界面活性剤を配合したことにより蛋白質をほぼ完全に除去でき、優れ た洗浄能力を兼ね備えています。このため、イルガサン配合品や塩化ベンゼトニウム配 合品と比べて効果が強く、HBs抗原に有効です。薬液をいつ交換したらよいかと、お 考えになられるかと思いますが、この製品は液の汚染が進むとPHの変化により青色か ら薄黄色に変色し取り替え時が、一目でわかりますので液の交換時期を間違えません。

成分/САЕ、特殊高級アルコール系非イオン界面活性剤、グリコール系水溶性溶剤、防錆剤、他

規 格	医院価格
2L	¥6,500
4L	¥12,000







2倍希釈 10分

小器具用 除菌/洗浄/防錆剤

こもの錆びてま専科

バー、リーマー、ファイル等の除菌・洗浄・防錆

主成分の塩化ベンゼトニウムは、安全性の高い歯科小器具の除菌防錆に最適の成分です。 器具に付着した血液、唾液に対し適切な洗浄力を発揮します。さらにジシクロヘキシル アンモニウムナイトライト配合により従来品に比べて大変優れた防錆効果があります。 スチール製品は、2倍の希釈液に10分以上浸漬し、あとは清潔なガーゼで水分を拭き 取り(乾燥)保管してください。ステンレス製品は浸漬したままでOKです。

成分/塩化ベンゼトニウム、ジシクロヘキシルアンモニウムナイトライト、ポリオキシエチレン オキシステアリン酸トリグセライト、安定剤、他

規格	医院価格
2L	¥4,000
4L	¥7,500



15



10倍希釈 30分

パイプ用 除菌/洗浄/消臭剤

パイプつまりま専科スーパー

配合除菌パイプクリーナー

管内にこびりついた汚れを活性剤で可溶化し、グリコールエーテルで剥離させるパイプ クリーナーです。従来品は表面の汚れをとるだけなので時間がたつと臭いが出ました。 この製品は汚れを剥離してから除菌するので、時間がたっても臭いが出ません。また 塩素を使用していないので、 金属、ゴムを傷めません。 通常は10倍希釈してスピッ トン、バキュームに流してください。バキュームチップの内部の汚れも10倍希釈で30 分浸漬してください。

成分/イソプロピルメチルフェノール、水溶性溶剤、キレート剤、他

規格	医院価格
4L	¥6,000



衣類用 除菌/洗浄剤

除菌洗濯しま専科

洗濯機の槽内・リネン類も同時に除菌・洗浄

白衣・タオル・エプロン等のリネン類の除菌だけでなく、洗濯機槽内まで除菌洗浄でき る液体洗剤です。一般洗剤は不要です。リネンに染み付いた嫌な臭いもとれます。 洗濯槽下部の水垢雑菌を除去し、洗濯機内部のカビの発生を抑えます。最初は2~3回、 空回しをしてから洗濯することをお勧めします。洗濯機の汚れがひどいと、これらがリ ネンに付着してしまうからです。また、数種類の界面活性剤で白く洗い上げる洗浄効果 があります。さらに環境に配慮した無リン洗剤です。一回の洗濯に約30mlで使用く

成分/イソプロピルメチルフェノール、テゴ51、界面活性剤、水溶性溶剤、キレート剤、他

規格	医院価格
4L	¥9,000







除菌クロス

特大除菌クロス

カタログ

- チェアユニット、キャビネットから器具まで除菌・清掃
- 160×300mmの特大サイズ
- 1枚でOK!経済的

成分/エタノール47%、精製水52%、食品添加物1%以下

※本製品はエタノールを含有するのでアルコールに耐性がない材質には使用しないでください。

規格	医院価格
容器付 250枚入	¥5,400
詰替用 250枚入	¥3,900







パワーリキッド

バー・ドリル用 錆取剤

パワーリキッド

スチールバー、カーバイトバー、インプラント用ドリルの頑固な錆や黒い変色を除去します。

成分/除錆剤、浸透剤、防錆剤

規格	医院価格
1L	¥6,500

バー・ドリル用 防錆剤

メタルケア

カタログ

オートクレーブ滅菌中にスチールバー、カーバイドバー、インプラント用ドリルの防錆剤。

成分/金属腐蝕防止剤、精製水

規格	医院価格
1L	¥5,500







オートクレーブの水槽タンクに注入して滅菌すると器具が錆びません

本品の強力な防錆力は滅菌中にバー類、外科用器具を錆びさせず、切れ味も変わりませ ん。また配合成分は高品質で安全性が高く、使用後の排水も環境に配慮した優れた防錆 剤です。(PRTR法非該当品)

本品は熱による器具表面の金属焼け(黒色変化)を防止しますので器具の寿命が長くな ります。(1回の使用量100ml)

成分/金属腐蝕防止剤、消臭剤、精製水、他

	医院価格
メタコート AR-H 1L	¥5,200
クレーブウォッシャー(オートクレーブ用洗浄剤)	¥1,500
メタコートクレーブウォッシャーセット	¥6,500





※歯ブラシは80℃対応表示の物を使用して下さい。 ※殺菌灯の交換目安は3000時間です。 (1日2回、年間300日使用で5年に1度交換)

17

歯ブラシ殺菌乾燥保管庫

クリアブラシCB-100S

カタログ

歯ブラシによる口腔感染を子供から高齢者まで守ります!

歯ブラシの毛と毛の間まで遠赤外線熱風が通り殺菌します。

本器独自の遠赤外線熱風と殺菌灯による効果で真菌、ウイルス、細菌の口腔疾患連菌や 外患病原菌を素早く消毒殺菌・乾燥させ50分後に自動停止します。そのまま保管庫と して24時間以上ご使用可能です。

規格	医院価格
25本	¥178,000
30本	¥182,000
35木	¥186.000

※収納本数





阿手指消馬利

2 1-70-FE

ラテックスゴム製カバー

オロキーパー SAタイプ

超音波スケーラーは樹脂製であることが一般的で滅菌を避けようとする歯科医院様が多 く、清拭だけで対応しているケースもあります。

オロキーパーを毎回付け替えれば患者様も安心です。患者間感染予防、頻繁な消毒によ る故障や劣化、異物混入による故障を防ぎます。また唇・歯への接触時の不快感を無く します。

対象/超音波スケーラー、エアーシリンジ、ペン型光重合器、ストレート技工用ハンドピース

規格	医院価格
6個入	¥270
102個入	¥3,960

手指消毒ジェル

プチクールジェル80

カタログ

用途

● 手指の消毒

特 長

- 高濃度エタノール配合の速乾性アルコールジェルです。
- ベタつきを抑えサラリとした低粘度ジェルです。
- 保湿剤配合で肌に潤いを与えます。

使用方法

● 適量を手のひらに取り手指全体に伸ばし乾燥するまでよく擦り込んでください。

■ エタノール 76.9 ~ 81.4vol%

ヒアルロン酸 Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、 カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

規格	医院価格
500ml	¥1,850



フェイスシールド

高透明・低反射フェイスシールド

カタログ

18

- 耐久性に優れたトライタン樹脂で曲げたりひねっても元の形状に戻ります。
- 超軽量で長時間つけても疲れにくいです。
- 柔軟性があるため締め付けがなく顔幅を選ばずに着用可能です。
- ワンタッチで簡単にシールド交換可能です。
- 眼鏡の上からでも装着可能です。

シールド

- 透過率 99.1%の高い透明度でクリアな視界です。
- 反射防止加工により反射や映り込みを 99%カット
- 撥水層により汗、汚れ、油分が付着しにくいです。
- 傷がつきにくい PET 素材です。
- ●水、薬品等でお手入れ可能です。
- 繰り返し使用可能です。
- 唾液飛沫から顔全体を保護します。

仕 様

フレーム色: クリア

シールドサイズ:縦 183×横 249mm

シールド厚み: 0.32mm

材質: フレーム / トライタン樹脂、シールド /PET 重量: 24g (フレーム 14g、シールド 10g)

規格	医院価格
フレーム 1 個	¥1,070
シールド1枚	¥2.330

2色染め

スピットン用

- ① 染め出し液で汚れた箇所にスプレーしてください。
- ② スポンジや布等で擦り洗いしてください。
- ③ 最後に良く水洗いしてください。

※汚れが落ちにくい場合は原液を染み込ませた布等を汚れた箇所に貼り付けて 2~3 分間放置してから擦り洗いしてください。

成分/界面活性剤、酵素剤、アルコール類、腐蝕防止剤、特殊アルカリ剤

規格	医院価格
スプレー 300ml	¥2,500
補充用 500ml	¥3,200

クローバー 歯垢染め出し液

おいしいフルーツミックス風味の2色染め

医院用

衛生・予防・口腔ケア・介護



(バイカラー)

ライトタイプ (バイカラー)

- 古い歯垢は青紫色に、新しい歯垢は赤色に染め分けることができます。
- ライトタイプと同様に染色液が除去しやすく、スピットンや器具の掃除が簡単です。
- 口唇や歯肉に付着しにくいので治療後に外出される患者さんも気軽に使用できます。
- 歯周組織検診時や TBI (歯ブラシ指導) に最適です。
- 綿棒などに液を数滴つけて歯面に塗布し、水で軽くお口をすすぎます。
- 青紫色に染まった部分が古い歯垢で、赤色に染まった部分は新しい歯垢です。

主成分/水、キシリトール、食用赤色 104号、食用青色 1号、香料

規格	医院価格	患者価格
50ml	¥1,320	¥2,112

医院用 ライト レギュラー 氷いちご 風味

ライトタイプ

- 染色液が除去しやすく、スピットンや器具の掃除が簡単です。
- 口唇や歯肉に付着しにくいので治療後に外出される患者さんも 気軽に使用できます。
- 歯周組織検診時や TBI(歯ブラシ指導)に最適です。

レギュラータイプ

- 見落としやすいプラークも隅々まで確実に染め出します。

主成分/水、キシリトール、食用赤色 104号、香料 ※グレープ風味のみ食用青色 1 号を含みます

現 格	医院価格	患者価格
50ml	各¥1,100	各¥1,760

1色染め

- 中度以上の歯周病・歯肉炎の羅患者、カリエス多発患者に最適です。
- ※レギュラータイプのサンプルはありません。

家庭用	2色染め	1色染め

ライト

フルーツミックス風味









グレープ風味

ライトタイプ

- 患者さんが自宅で使用できるライトタイプのミニボトルです。
- 待合室や受付カウンターなどに置いてご利用ください。

規格	医院価格	患者価格
フルーツミックス風味 5ml×12本入	¥3,500	1本 ¥363
氷いちご、グレープ風味 5ml×12本入	¥2,900	1本 ¥301

指導用



フルーツミックス風味

19





グレープ風味

ライトタイプ

● 学校や医療施設の集団検診などでも使用しやすい使い切りタイプ。

規格	医院価格
フルーツミックス風味 1ml×20包入	¥1,300
氷いちご、グレープ風味 1ml×20包入	¥1,200

2色染め 1色染め

電影楽の出し液の汚れ苦し 築め出し液落し降

シリコン製バキュームチップ

サンプル カタログ

クローバー「無痛」バキュームチップ Ver.2

大好評クローバー無痛バキュームチップの柔らかさはそのままに チップの先が折れにくくなってさらに使いやすくなりました

- 歯肉にあてても痛くない柔らかさ 厚さ最大 3.0 mm ※ショア硬度 A40 ※ショア硬度とは樹脂(Aは特にラバー系)の硬度を表す単位です。
- オートクレーブ滅菌、薬液滅菌全て OK!滅菌処理しても硬くなりません。
- 汚れの目立たないカラフル 7 色です。
- モリタ製チェア対応サイズもご用意しております。





パステルブルー

ハリューバック











イエロー

ピンク

オレンジ

グリーン





ホワイト ロイヤルブルー

規格	医院価格
同色10ヶ入	¥2,600
アソートタイプ10ヶ入(オレンジ、ホワイトを除く5色各2ヶ入)	¥2,600
バリューパック21ヶ入(全7色各3ヶ入)	¥5,200

スパークリングスマイルパウダー

カタログ



SUN438P ペリオタガトース

新成分の天然単糖タガトース

- 球状で平均粒径15μmの微細粒子は縁上・縁下のバイオフィルム除去やインプラント周辺の清掃に最適です。
- 主成分のタガトースは非う蝕性があり体内で代謝されにくく血糖値上昇の抑制効果があります。
- 研磨効果が穏やかで歯面をやさしく清掃し滑沢に仕上がります。

内容量:120g 主成分:タガトース 平均粒径:15 μm

規格 医院価格 120g ¥4,700



衛生・予防・口腔ケア・介護

SUN435Q TOP レモン



SUN436Q TOP ミント



SUN437Q TOP チェリー

縁上用

SUN435Q レモン SUN436Q ミント SUN437Q チェリー

研磨効果の高い炭酸水素ナトリウムを40μmに細粒化

- 歯肉縁上のプラークや強固なステイン除去に最適です。
- 球状で粒子サイズが細かいため歯面をやさしく研磨します。
- レモン・ミント・チェリーの3種類から選べます。

内容量:300g

主成分:炭酸水素ナトリウム、香料

平均粒径:40 μm

一般医療機器 歯面研磨剤 医療機器届出番号13B1X10122000016

規格	医院価格
300g	¥4,500


POWDER GUIDE

		_	
		PERIO Tagatose	TOP
品番		438P	435Q / 436Q / 437Q
香り		無香料	レモン/ ミント/ チェリー
成分		タガトース(99%)	炭酸水素ナトリウム 99%
粒子サイズ		15 <i>µ</i> m	40 <i>µ</i> m
рН		6 - 8	8.1 - 8.4
歯	ステインや幼若永久歯	0	0
	エナメル質	0	0
	エナメル質のホワイトスポット	0	_
	象牙質	0	_
歯肉	歯肉	0	_
	舌と口蓋	0	-
修復物	コンポジットレジン	0	-
	グラスアイオノマー	0	_
インプラント	インプラントとその周囲炎	0	_
歯列矯正	ブラケットや歯列矯正装置	0	_

歯ブラシ

Profits プロフィッツ

歯科医師の指導で歯を守る、様々な用途に応じて選べるハブラシ

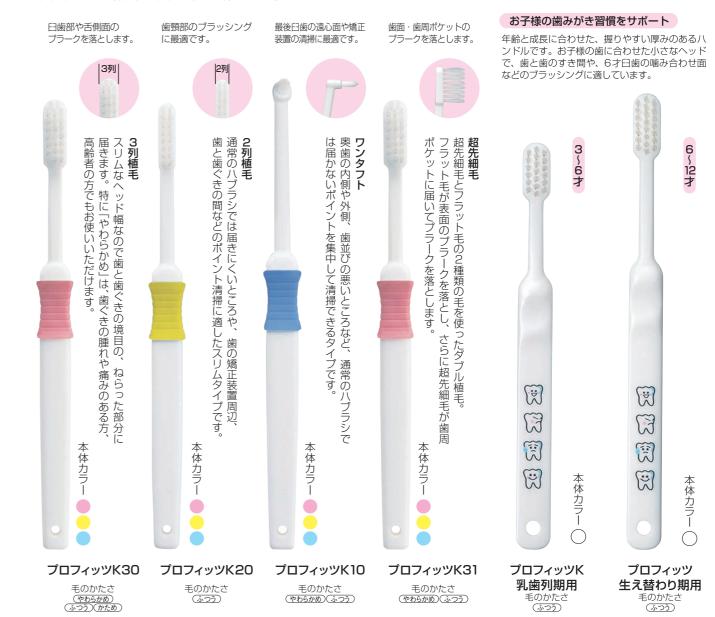

タイプ	品番	毛のかたさ	ラバーカラー	入数	包装(個別)	医院価格	患者価格
	BK-10S	やわらかめ	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,632	¥240
	BK-10M	ふつう	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,632	¥240
ワンタフト	BF-10S	やわらかめ	• • •	ピンク20本/ブルー20本/イエロー10本	袋入り 50本	¥4,950	-
	BF-10M	ふつう	• • •	ピンク20本/ブルー20本/イエロー10本	袋入り 50本	¥4,950	-
2列植毛	BK-20M	ふつう	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200
	BK-30S	やわらかめ	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200
	BK-30M	ふつう	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200
3列植毛	BK-30H	かため	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200
	BF-30S	やわらかめ	• • •	ピンク20本/ブルー20本/イエロー10本	袋入り 50本	¥3,950	-
	BF-30H	かため	• • •	ピンク20本/ブルー20本/イエロー10本	袋入り 50本	¥3,950	-
3列	BK-31S	やわらかめ	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,632	¥240
超先細毛	BK-31M	ふつう	• • •	ピンク4本/ブルー4本/イエロー4本	箱入り 12本	¥ 1,632	¥240
乳歯列期用	BK-51M	ふつう	0	ホワイト12本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200
生え替わり期用	BK-52M	ふつう	0	ホワイト12本	箱入り 12本	¥ 1,392	¥200



クロスが歯肉溝までしっかり入ります。

デンタルフロス

ナノフロス マイクロライザー

● マイクロファイバー採用 柔らかいマイクロファイバー(極細繊維)を編み込んだ構造が歯間部で広がりプラー クを効果的に除去します。

● ハイドロキシアパタイト配合 マイクロファイバーにハイドロキシアパタイト粒子とキシリトールを配合していま す。

タイプ / アンワックス

規格	医院価格	患者価格
25m	¥680	¥800

カタログ



ディスポーザブルブラシ

ジャーマンアプリケーター&ブラシ

- 2 級隣接面、3 級窩洞の側室また口蓋側や舌側の窩洞に便利
- ポスト孔の処理に最適
- 角度付きホルダーで目的部位へ精密に塗布
- 種類豊富なチップとブラシをご用意
- ホルダーはアングルとストレートの両頭
- ファインは直径 1.5mm で小さな窩洞に使用可能

種類/ファイン (紫) ×100 本入、レギュラー (黄) ×100 本入、レギュラー (緑) ×100本入、ブラシ(赤)×100本入、ホルダー(緑・白)×各1本 ※ホルダーは 121℃滅菌可能(乾燥工程不可)

規格	医院価格
スターターキット	¥2,400
チップ・ブラシ単品 100本入	¥500
ホルダー単品 2本入	¥600

ハブラシキャップ

指導用歯ブラシ 大人用

スパークリングスマイル アダルト3列ブラシ

- 臼歯部の清掃が確実なロングネックタイプです。
- 持ちやすさを追求したラウンドハンドルです。
- 先に向かって細い特殊スリムヘッドで臼歯遠心面に届きやすく毛先は歯間部の奥まで 入り込みます。

	規格	医院価格
-	司色25本入(1本あたり¥80)	¥ 2,000
	Nブラシキャップ 25個入	¥375

レベル0.1.2 3本入





レベル1 10本入





レベル3 10本入

1本入



リハビリ用品

長息生活

加齢とともに衰えてゆく呼気力と嚥下力ですが、長息生活を使ったトレーニングを続 けることで呼吸機能と嚥下機能の回復と強化が期待できます。

【呼気力の目安】※個人差があります

レベル 0: ティッシュペーパー 1 枚を吹いて揺らす程度 レベル 1:日常会話をはっきりとした声で話す程度

レベル 2: 普通の風船を膨らませる程度

レベル3:バースデーケーキのろうそくを一気に消せる程度

レベルMAX: 金管楽器を自由に吹きこなせる程度

11	
	MMM



指導用歯ブラシ こども用

スパークリングスマイル キッズ

- お子様が初めて使うハブラシから混合歯列期の複雑な口腔にも対応してます。
- コンパクトヘッドで操作性もよく、しっかり持てるグリップ設計が乳歯と永久歯が混 ざった口腔内でもしっかり磨けます。

規格	医院価格
同色12本入(1本あたり¥75)	¥900





一般医療機器 歯科予防治療田ブラシ 医療機器届出番号13B3X00108001000

予防

・口腔ケア

25

歯面研磨清掃

クローバー ポリッシングブラシ(PMTC用)

- 豚毛製なのでナイロン製に比べて歯牙、歯肉を傷つけません。 あらゆる歯面研磨剤にご使用できます。
- PMTC に最適です。

材質/豚毛 種類/CA用(黒毛、白毛)、HP用(黒毛) ※白毛はやや柔らかくなっています。

規格	医院価格
CA用 10本入	¥1,400
HP用 10本入	¥1,400

歯面研磨清掃


スパークリングスマイル コントラ エクストラソフト 雪色(PMTC用)

超軟質のナイロン毛先が柔らかい

- 良質で大変柔らかいナイロンを使用している PMTC 用ポリッシングブラシです。
- PMTC の最終仕上げ、歯肉緑下の清掃・研磨、外科手術後の歯面清掃に最適です。
- 接着剤を用いない特殊製法によりオートクレーブ滅菌が可能です。 ※121度乾燥工程不可
- ナイロンの毛先が大変柔らかく、ほど良く広がります。

材質/ナイロン製 種類/ CA用(白毛)

規格	医院価格
カップタイプ 12本入(前歯部・歯面唇側)	¥1,920
フラットタイプ 12本入(歯面唇頬舌側・咬合面裂溝部)	¥1,080
トライアルセット(カップタイプ、フラットタイプ 各1本入)	¥290

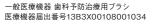



クローバー 口腔清掃用綿棒

介護に最適な型くずれしない特殊加工ヘッドを採用

- 綿棒成形での特殊加工により綿繊維がほつれず、水につけても使用中に型くずれ
- ご自身で歯磨きが困難な方の歯ぐき、歯、舌などの「口腔清掃専用」綿棒です。
- アイスマッサージや口腔内外科手術時の口腔内清掃にも最適です。

規格	医院価格
滅菌タイプ 50本入	¥2,500
未滅菌タイプ 50本入	¥1,500



スプレータイプ

フタ付きタイプ

お徳用タイプ

ミラーくもり止め

クローバー スパークリングミラー



デンタルミラー、口腔内撮影ミラー等に最適な曇り止め液

スプレータイプ

- ミラーに直接スプレーして自然乾燥させてお使いください。
- お急ぎの場合はエアーシリンジで乾燥させてください。
- 補充用には、お徳用 500ml 入りをご利用ください。

ワンタッチフタ付タイプ

- ミラーを液に浸して自然乾燥させてお使いください。 または液を清潔なガーゼ等に含ませてミラー表面に塗布してください。
- お急ぎの場合はエアーシリンジで乾燥させてください。

規格	医院価格
スプレータイプ 120ml×3本入	¥2,000
フタ付きタイプ 200ml×3本入	¥2,300
お徳用タイプ 500ml×1本入	¥1,900



ドレープ

クローバー 撥水フェイスドレープ

- 日本人の開口サイズに合わせた楕円形の開窓部です。
- 汚れがつきにくい特殊生地 (ポリエステル 100%) でアイロンが不要です。
- 特大サイズでパウダージェットポリッシング時や切削片から患者様の顔や衣類を しっかり保護します。(PMTCに最適)

サイズ/47.5cm×47.5cm 開窓部:8cm(幅)×6cm(縦) カラー/イエロー、ピンク、ブルー

規格	医院価格
1枚入	¥1,300



口腔保湿ジェル

キュオム ウェットプラス

カタログ

- 口腔内でダマになりにくく塗り広げやすい。
- ジェルが乾燥せずに固まりにくい。
- スポンジブラシや指から垂れにくく塗布しやすい。
- 薄く伸ばしやすく厚塗りにならないので咽頭に落下しにくい。
- アルコール、パラベン、合成着色剤フリーの低刺激処方。
- ベタつきが少なく使い心地がよい。
- 3 種の保湿成分配合で長時間潤う。

成分 / 水、グリセリン、プロパンジオール、(PEG-240/ デシルテトラデセス -20/HDI) コポリマー、オリーブ油、ポリクオタニウム -51、ポリアクリル酸 Na、 グリチルリチン酸2K、クエン酸、セチルピリジニウムクロリド、 加水分解ヒアルロン酸

規格	医院価格	患者価格
80g	¥1,620	¥1,800



サンプル カタログ

スマイルハニー はちみつジェル

気になるお口の渇きを潤すジェルタイプの食品です。後味すっきりのはちみつ味がお いしく保湿し、さらにレモン果汁のほど良い酸味が唾液分泌を促進します。お口の中 を充分に潤した後は、飲んでも問題ありません。飲み込むことで喉も潤します。介護 における高齢者のドライマウス対策としてもおすすめです。

成分/ハチミツ、キシリトール、緑茶カテキン、レモン果汁 (ビタミン C)、 プロポリス、オリゴ糖、シャンピニオンエキス、他

規格	医院価格	患者価格
徳用 90g	¥1,350	¥1,500
1週間 3g×7包	¥412	¥458

口腔湿潤ジェル(化粧品)

スマイルハニー オーラルクリーンジェル

卵黄由来の湿潤成分(オーバルゲン CA)を配合したパイナップル味の口腔保湿ジェ ルです。オーバルゲン CA は口腔内のバイオフィルムをやわらげ落としやすくする効 果があるので、汚れやバイ菌を落として口腔内を快適に整えます。また、潤い成分コ ラーゲンを配合しているので唾液が不足して乾いたお口を潤します。

成分/水、ソルビトール、グリセリン、キシリトール、乾燥卵黄、マルチトール、 クエン酸 Na、クエン酸、香料、加水分解コラーゲン、他

※本品は卵を含む原材料を使用しているため、卵によるアレルギー症状のある方は使用 しないでください。

規格	医院価格	患者価格
70g	¥841	¥934

口腔湿潤ジェル(化粧品)

スマイルハニー オーラルクリーンジェルスプレー

乾いたお口を潤すジェルスプレーで外出先や人前でもお口の乾きが気になったら簡単 に潤いケアできます。ワンプッシュで細かいミストが広範囲に広がりお口の中でピ タッと固まります。塗り広げが不要なので指が汚れず衛生的です。

成分/水、グリセリン、プロパンジオール、ヒアルロン酸ナトリウム、キシリトール、

規格	医院価格	患者価格
50ml	¥990	¥1,100

義歯洗浄液

スマイルハニー ナチュラルデントクリーナー

漂白剤無配合のフルーツ酸で洗浄する入れ歯にやさしい自然派洗浄液です。歯の表面 に付着したバイオフィルムの中の菌まで浸透除菌します。入れ歯だけではなく、リテー ナーやマウスピースなど様々な素材に使用できます。

成分/有機酸(クエン酸、リンゴ酸)、界面活性剤、エタノール、チャ乾留液、香料(レ モンライム)、色素

規格	医院価格	患者価格
50ml	¥855	¥950



日本に新デザインでデビュー ミラノ メディカル ファッション

ds+ミラノは医療分野での20年にわたる経験を生かし、世界的なファッションの 創生地ミラノの感覚をふんだんに盛り込んだ新しいメディカルウェア コレクションです。 天然素材として最も適した高級純綿(100%)をギャバジン織に仕上げ、機能を重視し、 イタリアの伝統あるプロのカッティングと縫製技術を融合しました。

豊富なカラーとアイテムによる自由なコーディネートをお楽しみください。 今までにない新しいファッション性を兼ね備えたds+ミラノ コレクションが、

働く皆様を常にフレッシュにさせ、患者さんを和ませ、明るい医療現場を演出いたします。



レディス

アルーレ#00······ ¥18,000
ユミ#01・・・・・・・・・¥17,100
エンジョイ#02····· ¥17,400
フライ#05····· ¥17,100
オキ#04······¥20,900
ファン#06······¥20,900
オールウェイズ#08・・・・・・・・ ¥15,600
アクシル#10····· ¥14,600
チャーム#12······ ¥15,600
ファルマ フォー ウーマン#13・・・・・・・ ¥16,300
Д - ド#14····· ¥18,100
メンブ

ダイナミック#15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥14,600
シナジー#16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥15,300
エリート#17・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥15,600
パワー#18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥16,900
エナジー#19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥16,500
ファルマ フォー メン#20・・・・・・・・・・・・・・・・	¥16,300
テクノ#21・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥16,500

ネクスト#11・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥13,900
タイム#03・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥14,100
アクション#07・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥16,900
アクション#07デニムジーンズ・・・・・・・・	¥21,900
リビング#09・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥18,100

ナイス#22・・・・・・・・・・¥15.400

) /\π/L	+ 10,400
ナイス#22デニムジーンズ・・・・・・・・・・	¥19,100
シティー#23・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥12,100
トゥエンティ#24・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥11,800
クラス#25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥14,600
テン#26・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥12,900
テン#26デニムジーンズ・・・・・・・・・・・・	¥19,200
11"~ , 4"-1	

バンダナ

バンダナ3枚入#27····· ¥10,900 手術用布10枚入#28····· ¥15,200

アルーレ#00

ホワイト



オレンジ



フライ#05 レッド



ファン#06 ホワイト



日本うるおすジェ







ネクスト#11 ホワイト





ネクスト#11 ブルー



29





衣



リビング#09 ライトグリーン



シティー#23 ホワイト



トゥエンティ#24 ホワイト



クラス#25 ホワイト



テン#26 ホワイト





移送用ケース

モバイルシェルター

インプラント器具、技工物、ジルコニア、ベニアクラウン等の搬送に最適です。2 枚 の伸縮膜で精密器具技工物を優しく包みます。

- 透明カプセルなので中身を取り出さずに確認できます。
- 商品を空中で固定しているので、あらゆる衝撃から保護します。
- 先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
- 完全容器タイプなので何度でも使用できます。

	規格	医院価格
SSS	W39×D39×H17.8(mm)	¥570
S	W120×D75×H25(mm)	¥2,000



指サック

クローバー フィンガー君

- ゴムに不可欠の硫黄を除いた指サックです。
- 金・銀・銅をはじめ硫黄をきらう部品の取扱用や精密技工作業用としてお薦めします。
- 汚れは洗剤などで清拭して再使用できます。
- 打粉を少なくしてあります。

材質/合成ゴム

サイズ(mm)	L	М	S
内 径	18.5	15.5	13.0
長さ	33	33	33
厚さ	0.18	0.18	0.18

'ソートタイ	プもあります。	L7個/M7個/S6個入り
- 171	7 000 7 6 7 6	

規格	医院価格
20個入	各¥2,600

6種類 No1 〈 No6		102				
サイズ	大	大細	中	中細	小	小細
規格	No1	No2	No3	No4	No5	No6
内径(mm)	22.5	20.0	18.0	17.0	15.0	13.0
長さ(mm)	51	51	48	48	40	36
厚さ(mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

技工用指サック

しっかりつかみ隊

- 表面加工による滑り止め効果が優れ、磨耗や引裂きにも強く作業対 象物をしっかり保持できます。
- アルコール消毒可能です。(オートクレーブ不可)

材質/天然ゴム

規格	医院価格
10個入	各¥1,800

Panther パンサー

カタログ

2つのシリコンポイントとペーストだけの新システム



● 2 ステップによる研磨とツヤ出しのみ

Smooth 5 sec



Paste 5 sec

● 推奨マテリアルはジルコニア、ポーセレン、ニケイ酸リチウム



TCP ミディア	'ム ポイント	【 Smooth 】					
	Н	IP		RA(CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104M	TCP140 104M	TCP158 104M	TCP541 104M	TCP103 204M	TCP126 204M	TCP143 204M	TCP144 204M
	7	7	T	ø	¥	T	Ŧ
Flame 055 Φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 Φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 Φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 Φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 Φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 Φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100	Lense 100 Φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
¥2.400 / 1本	¥9.800 / 1本	¥6.500 / 1本	¥5.900 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本

TCP エクストラファイン ポイント 【 Gloss 】							
	Н	IP		RA(CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104XF	TCP140 104XF	TCP158 104XF	TCP541 104XF	TCP103 204XF	TCP126 204XF	TCP143 204XF	TCP144 204XF
	丁	T	T	į.	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Flame 055 Φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 Φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 Φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 Φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 Φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 Φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100 Φ10mm 6.000/20.000	Lense 100 Φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
¥2.400 / 1本	¥9.800 / 1本	¥6.500 / 1本	¥5.900 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本







一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号13B1X10122000013

LED無影灯

Luvis E-100

貸 出 カタログ

スタイリッシュなデザインと高演色性を追及した移動式LED無影灯



Ⅰ 高演色性と色温度・照度調節機能

Luvis-E100は独自開発した高演色LEDを使用し、広範囲の照度 調節と色温度調節により、幅の広い症例に対応が可能です。

業界屈指の技術により、高演色指数 Ra95 を保ち、太陽光に近 い自然な発光色を演出します。

Selectable Color Temperature



■ スリムなキャリーベース

コンパクトながら機能性の高いLuvis-E100は、直径幅Φ 510mmのキャスター付で、設置の場所も選びません。

軽量化が図られているため、簡単な組み立て式で検診用などに も簡単に持ち運びが可能です。



各製品スペック	ライト個数	照度範囲	色温度範囲	演色数 CRI	照射範囲	消費電力	ライト寿命	重量
Luvis-E100 M type	8	5,000~60,000Lux	3,500K/4,000K/4,500K	Ra: 95, R9: 90	17cm	20W	50,000 時間	10kg

一般医療機器 手術用照明装置 医療機器届出番号13B1X10122000010

規格	医院価格
モバイルタイプ	¥228,000

Easy to Install and Use

35



クロステック サイクロンジルコニウム クラウンリムーバー

- ●ジルコニアやメタルボンドの修復物を短時間で除去するために開発されました。
- ●大きなダイヤモンド粒子を強固に結合することで高い切削力と長時間の使用が可能
- ●他のダイヤモンドバーと見分けやすいようブラック色に加工してあります。

作業部/9mm 軸部/ 12mm 型番/ZB6LLC

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器届出番号13B1X10122000017

規格	医院価格
5本入	¥5,000



歯肉圧排糸

ミュラーオミクロン EASY CORD

- ●歯肉からの血液や滲出液を容易に吸い取りマージンが明視できます。
- ●液体吸水性が高いので収斂剤を併用できます。
- ●歯質と軟組織を見分けやすい色です。

種類/#000(緑)、#00(茶)、#1(青)

長さ/330cm 素材/綿糸

薬剤/非含有



一般医療機器 歯肉圧排糸 医療機器届出番号13B1X10122000014

規格	医院価格
330cm	¥2,600



角薬瓶 サクラ色

- ●サクラ色のかわいい角薬瓶です。
- ●薬品使用を容易にするガラス薬瓶です。

カラー/サクラ色 サイズ/W27×D27×H53mm 容量/8ml

(株)堀内製作所

規格	医院価格		
8ml	¥1,280		

防災·防犯

すべての人に安全を。

地球上の面積の僅か400分の1の国土しかない日本ですが、

地球上の災害の10%は狭い日本に集中しております。

さらに昨今の気象変化により、多くの災害が発生しております。

従業員やご家族の安全を確保するためには、まず備えなくてはなりません。

LIFE ZACKカタログには、約2100品目のアイテムをご用意しておりますので

あらゆる災害から身を守る用意を行うことができます。

どうぞお気軽にLIFE ZACKカタログをご請求ください。









2022年3月発行

- 表示価格は2022年3月現在の医院価格、患者価格です。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。
- 仕様および価格、包装は予告なく変更する場合があります。

3

佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3 TEL. 03-3833-3986 FAX .03-3833-3989 URL. http://www.satoushizai.co.jp

[松戸商品センター] 〒271-0068 千葉県松戸市古ヶ崎207-1





ISO 9001/14001認証取得