



Switzerland

Oro Clean Chemi AG (スイス)

ドイツ応用衛生協会
認定品

Listed in DGHM-List

スイス生まれの院内感染制御シリーズ

ASEPTOPRINT® Spray

アセプトプリント スプレー


すべての印象材に使用でき、
寸法精度に影響を与えず
印象表面を1分間で除菌・洗浄します

用 途

印象表面、印象用トレー、矯正用装置、ワックスバイト、技工用器具、補綴用材料などの除菌・洗浄

使用方法

- 印象表面およびトレー全体にスプレーしてください。(原液使用)
- 1分経過したら表面を丁寧に水洗いして石膏を流してください。

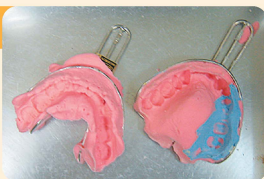

主 成 分

エタノール、1-プロパノール、第4級アンモニウム化合物

※本製品はアルデヒドを含んでおりません

〈 注意事項 〉

- 印象採取後に血液・唾液が付着している場合は飛散しないように注意して水洗いしてください。
- アルコールに耐性の無い材質には使用しないでください。
- 印象材によっては石膏の最適時期が異なりますので印象材メーカーの指示に従ってください。

■スプレー 1L

■詰替用 1L



 佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3
T. 03-3833-3986
F. 03-3833-3989
e-mail: info@satoushizai.co.jp
URL <http://www.satoushizai.co.jp>



ご用命は